

RODZINA WÓZKÓW LIFE

ZNAJDŹ TEN, KTÓRY PASUJE DO
TWOJEGO STYLU ŻYCIA

To jest wyrób medyczny. Używaj go
zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

RODZINA WÓZKÓW LIFE

ŻYJ PEŁNIĄ ŻYCIA.
RODZINA WÓZKÓW QUICKIE LIFE ZAPEWNI
WIĘCEJ SWOBODY NIŻ KIEDYKOLWIEK.

Rodzina wózków LIFE zachwyca lekkością, wytrzymałością,
nowoczesnością i ilością regulacji.

Mając do wyboru sztywną ramę zapewniającą wydajność lub
składaną ramę ułatwiającą transport, z łatwością znajdziesz LIFE,
który Ci odpowiada.



LIFE

WSZECHESTRONNY

Składana rama,
zamknięty przód i odchylane
podnóżki (na zdjęciu)





LIFE R

SPORTOWY CHARAKTER

Sztywna rama,
zamknięty przód (na zdjęciu)
i odchylane podnóżki



LIFE i

REGULOWANY

Składana rama,
odchylane podnóżki



A man with curly hair and glasses, wearing a red hoodie and black pants, is seated in a wheelchair on a green artificial turf surface. He is leaning forward with his right hand extended towards a black and white dog that is jumping over a blue and yellow horizontal bar. The background features a white wall with a blue diamond pattern and a wooden frame. The text "LIFE" is written in large, dark red letters on the right side of the image, with "DROGA DO NOWOCZESNOŚCI" written in smaller, dark red letters below it.

LIFE

DROGA DO
NOWOCZESNOŚCI

EASY LIFE

Żyj pełnią życia. Wyjdź i zwiedzaj świat.
Niezależnie od Twoich planów, Twój LIFE jest gotowy.

Dostępny z zamkniętym przodem i odchylanymi podnóżkami, Quickie Life może zaspokoić szereg potrzeb i wymagań stawianych wózkowmi składanemu. Life wykorzystuje sprawdzony od dawna projekt, który zapewnia bardzo solidny wózek i energooszczędne konfiguracje przy maksymalnej wadze użytkownika do 140 kg.

Ale po co się na tym zatrzymywać? Spersonalizuj swój LIFE, wybierając spośród szerokiej gamy osłon bocznych, podłokietników, uchwytów podnóżków, płyt podnóżków, kół i ciągów. Lub zdefiniuj swój styl, wybierając spośród 24 kolorów ram i anodowanych części.



LIFE

WSZECHESTRONNY

Składana rama,
zamknięty przód i
odchylane podnóżki



Opcje i akcesoria LIFE – Skonfiguruj ten składany wózek do swoich indywidualnych potrzeb. Więcej informacji na temat opcji produktu można znaleźć w formularzu zamówienia LIFE.



// SIEDMIOSTOPNIOWA REGULACJA WYSOKOŚCI SIEDZISKA

Pochylenie tylnych kół w zakresie od 0° do 4°, 4 położenia środków ciężkości (od bardzo aktywnego - 8,3 cm, do pasywnego - 2,3 cm)



// NOWOCZESNY KSZTAŁT PODŁOKIETNIKA STOLIKOWEGO Z PODUSZKĄ

Wzmocniona konstrukcja i nowoczesne wzornictwo.



// BLOKADA ZABEZPIEZAJĄCA WÓZEK PO ZŁOŻENIU

Obsługiwana jedną ręką, nie pozwala na samoczynne rozłożenie się wózka.



// NOWOCZESNY DESIGN OSŁON BOCZNYCH

Odświeżony design aluminiowych i karbonowych osłon bocznych.



// RAMA AKTYWNA Z ODCHYLANYMI PODNÓŻKAMI

Kompaktowa rama teraz dostępna również w wersji 90° z bardziej sportowym designem.



// KOMPAKTOWY ROZMIAR (PO ZŁOŻENIU)

Składane oparcie i zdejmowane podnóżki zapewniają kompaktowy rozmiar po złożeniu.



// PODNOSZONA PLATFORMA PODNÓŻKA

Lekka platforma z regulacją kąta i głębokości.



// INDYWIDUALNE DOPASOWANIE

Możesz wybierać spośród trzech stylowych kolorów widełek i wsporników łączących ramę z rurką osi.

LIFE R

WÓZEK O BUDOWIE
MODUŁOWEJ

AKTYWNY LIFE R

Sztywny, wytrzymały i trwały wózek LIFE R powstał z myślą o poprawieniu jakości życia teraz i na wiele lat do przodu. Niezależnie od tego co przytrafi Ci się podczas aktywnego dnia, wózek LIFE R pozwoli Ci być zawsze na właściwej drodze.

Dostępny w wersji z zamkniętym przodem lub odchylanymi podnóżkami. Nowy wózek LIFE R ma konstrukcję modułową, co oznacza, że przód ramy można zmieniać tak, aby zwiększać głębokość siedziska lub modyfikować typ ramy.

Rama z zamkniętym przodem występuje w wersjach z różnymi kątami gięcia (75°, 85° i 85° z taliowaniem ramy) oraz w czterech różnych długościach.

Rama z odchylanymi podnóżkami jest dostępna z trzema kątami gięcia (70°, 80° i 90°), z różnymi rodzajami podnóżków i w trzech długościach.



LIFE R

SPORTOWY CHARAKTER

Sztywna rama,
zamknięty przód (na
zdjęciu)
i odchylane podnóżki



Opcje i akcesoria LIFE R – Skonfiguruj ten wózek na sztywnej ramie do swoich indywidualnych potrzeb. Więcej informacji na temat opcji produktu można znaleźć w formularzu zamówienia LIFE R.



// SIEDMIOSTOPNIOWA REGULACJA WYSOKOŚCI SIEDZISKA

Pochylenie tylnych kół w zakresie od 0° do 4°, 4 położenia środków ciężkości (od bardzo aktywnego - 8,3 cm, do pasywnego - 2,3 cm)




// UNOWOCZEŚNIONY HAMULEC Z DŹWIGNIĄ NA WYSOKOŚCI KOLAN

Łatwy w obsłudze hamulec z odchylaną dźwignią.



// OPARCIE Z REGULACJĄ KĄTA (OPCJONALNIE)

Lekkie i łatwe w regulacji. Regulacja kąta w zakresie 20°, od -12° do +8° w skokach co 4°.

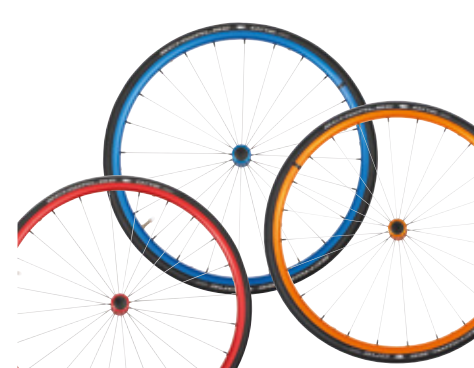

// ANODYZOWANE 24" KOŁA TYLNE

Jeszcze bardziej podkreśl swój styl dopasowując kolor obręczy i piasty tylnego koła 24" - do wyboru są trzy anodyzowane kolory.



// INDYWIDUALNE DOPASOWANIE

Możesz wybierać spośród trzech stylowych kolorów widełek i wsporników łączących ramę z rurką osi.



// CIĄGI ELLIPSE 3R

Gumowa powłoka Gripton nadaje ciągom owalny kształt i zapewnia maksymalną siłę ciągu.



// BLOKADA PŁYTY PODNÓŻKA

Podnóżek, który zawsze zostaje na swoim miejscu, nawet podczas jazdy po nierównym terenie.



// AKTYWNE, ODCHYLANE UCHWYTY PODNÓŻKÓW

Nowoczesny i aktywny wygląd. Dostępne w wersjach 70°, 80° i 90°.



LIFE i

ODPOWIEDNIE DOSTOSOWANIE
DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB

LIFE i

W PEŁNI REGULOWANY

Szerokie możliwości regulacji wózka LIFE i sprawiają, że jest to idealny wybór dla użytkowników z postępującymi schorzeniami neurologicznymi takimi jak udar, ALS czy stwardnienie rozsiane. Wszechstronne funkcje dostosowawcze sprawiają, że LIFE i zawsze współgra ze zmieniającymi się wymaganiami użytkownika.

Pacjenci po udarach często dotknięci są połowicznym porażeniem. Opcja napędu i blokady kół na jedną rękę, odchylanego lub nasywanego stolika oraz podłokietników Hemi to duże wsparcie w takich przypadkach. Również opcja niskiej wysokości siedziska stworzona jest z myślą o pacjentach napędzających wózek stopami. W przypadku stwardnienia rozsianego i ALS odchylane oparcie z regulacją kąta w połączeniu z oparciami JAY zapewniają optymalną postawę tułowia. Z możliwością regulacji co 1 cm przedniej i tylnej wysokości siedziska, kąt może być na bieżąco dostosowywany do zmieniających się potrzeb.



LIFE i

DOSTOSOWANY DO
TWOICH POTRZEB



Opcje i funkcje LIFE i – Skonfiguruj ten składany wózek do swoich indywidualnych potrzeb. Więcej informacji na temat opcji produktu można znaleźć w formularzu zamówienia LIFE i.



// ŁATWA REGULACJA PRZEDNIEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA

Pełny zakres wysokości od 38 do 54 cm, zaprojektowany z myślą o terapii neurologicznej. Idealny również do napędzania wózka stopami.



// WSZECHSTRONNIE REGULOWANY ELEMENT TYLNEJ WYS. SIEDZISKA

Za pomocą jednego elementu można regulować wysokość tylną siedziska, środek ciężkości i pochylene kół.



// ZWIĘKSZENIE GŁĘB. SIEDZISKA

Głębokość siedziska może być dostosowana poprzez przesunięcie rurek tylnych, a tapicerka może być wydłużona lub skrócona o 4 cm.



// PODŁOKIETNIKI Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI

Podłokietniki obsługiwane jedną ręką z regulacją wysokości i wygodną poduszką. Idealne dla hemiplegika.



// STOLIK ODCHYLANY (POŁÓWKA)

Stolik boczny dla pacjentów np. po udarze. Można go montować po lewej lub prawej stronie.



// PODŁOKIETNIKI HEMI

Podłokietnik zapewnia dobrą pozycję ramienia, zwłaszcza użytkownikom z połowicznym porażeniem.



// PELOTY BOCZNE

Dla wyższej stabilności tułowia. Można regulować wysokość, kąt i głębokość.



// PODUSZKI I OPARCIA JAY

Wózek LIFE i może być wyposażony w produkty z linii JAY, w celu uzyskania optymalnej stabilności.

DANE TECHNICZNE

	Life	Life R	Life i
Maks. waga użytkownika	140 kg	125 kg	140 kg
Wersja ramu i kąt gięcia	Rama z zamkniętym przodem: 75°/85°/85° z taliowaniem 20 mm, Rama z odchylanymi podnóżkami: 90°/80°/70°	Rama z zamkniętym przodem: 75°/85°/85° z taliowaniem 20 mm, Rama z odchylanymi podnóżkami: 90°/80°/70°	Rama z odchylanymi podnóżkami: 90°/80°/70°/
Szerokość siedziska	360 - 540 mm	340 - 480 mm	340 - 540 mm
Głębokość siedziska	360 - 500 mm	360 - 500 mm	360 - 540 mm
Wysokość siedziska z przodu	400 - 540 mm	390 - 500 mm	380 - 540 mm
Wysokość siedziska z tyłu	400 - 510 mm	360 - 470 mm	370 - 510 mm
Wysokość oparcia	250 - 500 mm	250 - 450 mm	360 - 500 mm
Kąt oparcia	78° - 102°	78° - 98°	85° - 115°
Pochylenie kół (camber)	0°/1°/2°/3°/4°	0°/1°/2°/3°/4°	0°/3°
Całkowita szer. // długość // wys.	760 mm // 1075 mm // 995 mm	720 mm // 1075 mm // 950 mm	784 mm // 1190 mm // 1125 mm
Maks. szerokość zawracania	700 mm	700 mm	960 mm
Maks. bezpieczne nachylenie	7° (do użycia hamulca)	7° (do użycia hamulca)	7° (do użycia hamulca)
Kółka przednie // Koła tylne	4"/5"/6"/7" // 22"/24"/25"	4"/5"/6"/7" // 22"/24"/25"	5"/6"/7" // 22"/24"
Waga wózka	od 11 kg	od 11 kg	od 14,5 kg
Waga wózka po demontażu	od 6,7 kg	od 6,7 kg	od 10,2 kg
Waga najcięższego elementu	2,1 kg	2,1 kg	2,1 kg
Części demontowalne	Tylne koła i uchwyty podnóżków (tylko do transportu)	Tylne koła i uchwyty podnóżków (tylko do transportu)	Tylne koła i uchwyty podnóżków (tylko do transportu)
Kolory	24	24	24
Crash test	Tak (dopuszczony do transportu w pojeździe zgodnie z ISO 7176-19)		
Transport bez użytkownika	Dozwolony do transportu (w samochodzie i samolocie)		
Przeznaczenie i środowisko	Dla użytkowników z ograniczoną mobilnością (dzieci i dorośli); produkt do samodzielnego użytkowania lub opieki, do użytku wewnątrz i na zewnątrz.		



Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

Elektronowa 6

94-103 Łódź

Tel.: +48 42 275 83 38

Fax: +48 42 209 35 23

E-Mail: pl@sunrisemedical.pl

Producent:

Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4, Germany
D-69254 Malsch / Heidelberg
Tel. +49 (0)7253 980-0



Więcej informacji na temat pełnej specyfikacji, opcji i akcesoriów można znaleźć w formularzu zamówienia. Wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Sunrise Medical.
Osoby niedowidzące mogą zapoznać się z tym dokumentem w formacie PDF na stronie www.Sunrise-Medical.pl.

Rev.:07/2022